
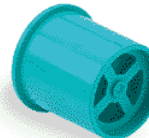


Válvula para el habla Passy-Muir®

Propósito

La válvula para el habla Passy-Muir ayuda a su hijo a hablar con una voz más clara. Su hijo inspira a través de la válvula para el habla y de la cánula de traqueotomía y exhala por la nariz y la boca.

Tipos de válvulas

<p>1. Esta válvula sólo se usa en niños con traqueotomía.</p>  <p>PMV 005 o PMV2001</p>	<p>2. Esta válvula sólo se usa en niños conectados a un respirador.</p>  <p>PMV 007</p>
---	--

Pautas

- **Siempre desinfe** el globo inflable si su hijo usa una cánula que lo tenga.
- La válvula para el habla (que se usa solamente para los que tienen traqueotomía) se ajusta a la cánula traqueal girándola suavemente. Se saca también con un giro suave hacia el otro lado.
- La válvula para hablar del respirador se coloca en el circuito de respiración usando adaptadores.
- Si su hijo usa oxígeno, **él debe usar** oxígeno cuando lleve puesta la válvula para el habla.

Instrucciones especiales

- Use la válvula cuando su hijo esté jugando o cuando esté intentando producir sonidos.
- Si su hijo tiene problemas para respirar mientras usa la válvula, quítesela. Si el problema continúa mientras usa la válvula, llame a su médico.
- Su hijo podría usar humedad mientras usa la válvula.
- Elimine las secreciones enjuagándola en agua tibia.
- **Quite la válvula cuando esté administrando tratamientos de respiración.**
- **No use esta válvula cuando su hijo duerma o cuando esté enfermo.**
- **Una persona debe estar con su hijo cuando él esté usando la válvula.**

Instrucciones de limpieza

1. Diariamente, lave la válvula agitando en agua tibia (no caliente) con jabón.
 2. Enjuáguela con agua tibia.
 3. Colóquela en una superficie limpia para secarla al aire.
- **No necesita** desinfectar la válvula a menos que así se lo indique su proveedor de servicios de salud domiciliarios.

Advertencia: No use agua caliente, peróxido, cloro, vinagre, alcohol, cepillos o hisopos (cotonetes, Q-tips®), debido a que pueden dañar la válvula.

Hay muchos fabricantes de válvulas de habla. Cada uno de ellos puede tener válvulas que vienen en diferentes colores o formas. Hable con el médico o terapeuta del habla de su hijo si tiene preguntas sobre la válvula de hablar de su hijo.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.