


Nebulizador accionado por respiración

¿Qué es un nebulizador accionado por respiración?

El inhalador accionado por respiración convierte la medicina líquida en un fino rocío el cual es inhalado hacia los pulmones. El nebulizador accionado por respiración funciona de dos modos:

- **Modo accionado por respiración:** Este modo se activa y desactiva cada vez que su hijo toma aire. Use este modo si su hijo puede seguir instrucciones y puede respirar lenta y profundamente durante el tratamiento. Esto comúnmente lo pueden hacer los niños a la edad de entre 4 y 5 años.
- **Modo continuo.** Este modo permanece activado todo el tiempo durante el tratamiento. Utilice este modo si su hijo no puede seguir instrucciones o no puede respirar lenta y profundamente.

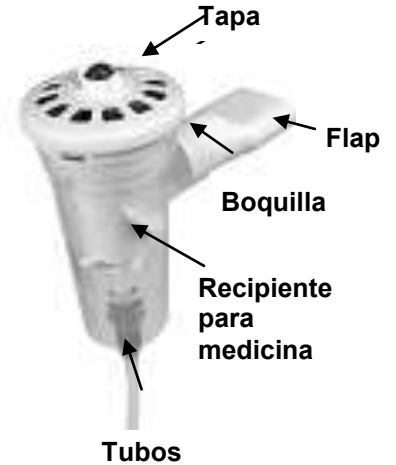

¿Cómo se dan los tratamientos?


Antes de comenzar en cualquiera de los dos modos siga estos pasos.

1. Lávese las manos con agua y jabón antes de usar el nebulizador accionado por respiración.
2. Conecte la máquina en un enchufe tomacorriente.
3. Desenrosque y retire la tapa del recipiente de la medicina del nebulizador accionado por respiración.
4. Ponga la medicina en el recipiente del nebulizador accionado por respiración.
5. Tape el recipiente del nebulizador accionado por respiración enroscando la tapa.
6. Conecte los tubos a la base del recipiente de la medicina y a su máquina.

Modo continuo con mascarilla:

Debe usarse una mascarilla cuando utilice este modo.


1. Conecte la mascarilla en la abertura lateral del recipiente para la medicina del nebulizador accionado por respiración.
2. Gire el interruptor apuntando hacia el triángulo sólido. Esto hará que la pequeña esfera verde en el centro de la parte superior quede en posición oprimida (abajo).
3. Colóquela la mascarilla a su hijo en la cara.
4. Encienda la máquina y observe el vapor. Usted debe ver un chorro constante de vapor.
5. Su hijo debe respirar normalmente hasta que la medicina del recipiente del nebulizador accionado por respiración se haya terminado.

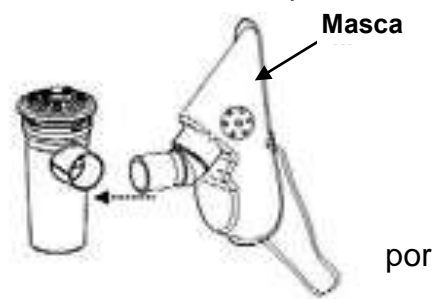

Modo accionado por respiración con la boquilla:


Debe usarse una boquilla cuando se utilice este modo.

1. Conecte la boquilla en la abertura lateral del recipiente para la medicina del nebulizador accionado por respiración. La aleta debe estar hacia abajo.
2. Gire el interruptor en la parte superior del recipiente para la medicina del nebulizador accionado por respiración apuntando al **triángulo rayado**. La esfera verde en el centro del nebulizador por respiración debe botarse y salir (estar arriba).
3. Colóquele la boquilla a su hijo en la boca.
4. Encienda la máquina y observe el vapor.
 - Cada vez que su hijo inhale (tome aire), la esfera se bajará. Cada vez que su hijo exhale (saque el aire) la esfera verde se botará (saldrá).
 - Usted verá el vapor únicamente cuando su hijo inhale (tome aire). Usted escuchará un sonido clic como un chasquido con cada respiración.
5. Su hijo debe continuar respirando lenta y profundamente hasta que toda la medicina del recipiente del nebulizador accionado por respiración se haya terminado.

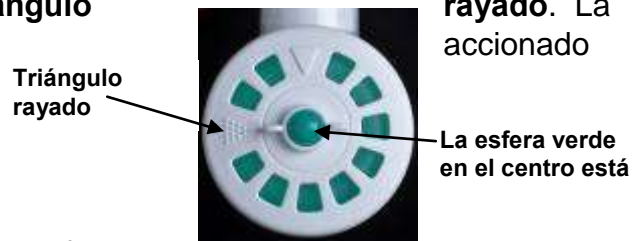**¿Cómo limpio el nebulizador accionado por respiración?**

Usted debe limpiar el nebulizador accionado por respiración antes del primer uso y entre cada tratamiento. El interruptor de modo debe estar en el **triángulo rayado** durante los ciclos de lavado y secado.

1. Desenrosque suavemente y retire la parte superior del nebulizador accionado por respiración y la boquilla del recipiente de la medicina. Lave el nebulizador accionado por respiración en una solución de agua tibia y detergente lavavajillas líquido.
2. Enjuague en agua limpia y tibia y sacuda el exceso de agua.
3. También puede lavar el nebulizador accionado por respiración en un lavavajillas **excepto los tubos**. Las partes deben ir en la canastilla superior del lavavajillas. Lávelo en un ciclo de lavado normal. Cuando el ciclo haya terminado, retire las partes de la canastilla, sacuda el agua restante y déjelas secar al aire.
4. Después de lavarlas: Deje secar por completo al aire cada una de las partes del nebulizador accionado por respiración (al menos 30 minutos) antes de volverlo a armar. También puede secar las partes con un lienzo limpio libre de pelusas antes de armarlo otra vez.

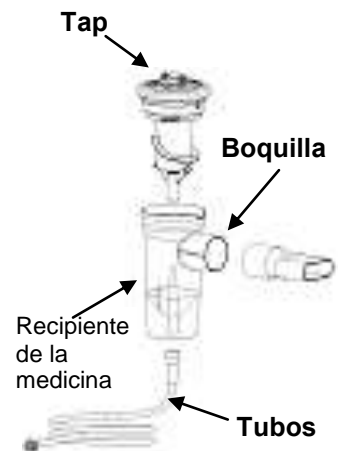

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier consulta o inquietud o si su hijo:

- Se siente tembloroso o el latido del corazón es muy rápido después del tratamiento.
- Continúa teniendo problemas para respirar aún después de usar el nebulizador.
- Tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento y el control o seguimiento.