

Nebulizador PARI LC[®] con Pari PEP

¿Qué es un nebulizador PARI LC Plus?

El nebulizador PARI LC[®] Plus convierte el medicamento líquido en un rocío para que su hijo lo inhale. Tiene válvulas que se abren y cierran cuando su hijo respira. Esto ayuda a disminuir que se desperdicie el medicamento. El PARI PEP[™] (Terapia de presión espiratoria positiva) ayuda a abrir aún más las vías respiratorias de su hijo, lo cual ayuda a eliminar las secreciones.

¿Qué necesita?

- El nebulizador PARI LC (vea la figura 1):
 1. Cámara del nebulizador
 2. Parte superior del dosificador
 3. Tubo de conexión
- Dispositivo PARI PEP.
- Máscara o boquilla PARI PEP.
- Máquina para nebulizador. Funcionará con un compresor de cualquier marca.

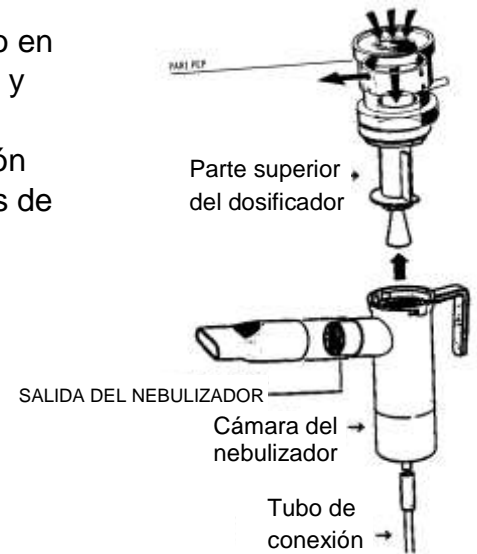


Figura 1

¿Cómo se usa?

El médico o la enfermera de su hijo le dirá cómo y cuándo usar este dispositivo. Asegúrese de hacer todas las preguntas que tenga. Siga estos pasos:

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Ponga el **PARI PEP** sobre el **dosificador**. Esto reemplaza la tapa de la válvula inspiratoria. Presione con fuerza.
3. Ponga la **boquilla** del **PARI[®]**, o la **máscara**, en la salida.
4. Ponga el medicamento en la **cámara del nebulizador**.
5. Vuelva a colocar la parte superior.
6. Conecte el tubo a la parte inferior de la cámara. Conecte el otro extremo a la máquina del nebulizador.
7. Encienda la máquina para nebulizar el medicamento.
8. Apague la máquina cuando se acabe el medicamento. El tratamiento debe durar aproximadamente 10 minutos.

Limpie el PARI LC con PARI PEP™ después de cada tratamiento.

- Retire el tubo y guárdelo.
- Separe el PARI LC y el Pari PEP.
- Lave todas las piezas con agua tibia y jabón. Enjuague con agua tibia. No sumerja el tubo en agua. Límpielo con un paño húmedo si está sucio.
- Deje que las piezas se sequen al aire. Guárdelas en una bolsa de plástico limpia.

Desinfecte el PARI LC con PARI PEP™.

1. Primero, limpie el equipo, luego desinfectelo.
2. Desinfecte el nebulizador Pari LC y el Pari Pep según las indicaciones de su proveedor de servicios de salud.
3. Use uno de estos métodos:
 - Ponga a hervir durante 10 minutos. **No hierva la tapa de silicona que cubre el puerto en el Pari PEP.** Se llama tapa del manómetro. No sumerja el tubo en agua.
 - Es seguro limpiar en la repisa superior del lavavajillas. Para desinfectar, su lavavajillas debe alcanzar por lo menos 158 grados durante 30 minutos. No deje las partes del nebulizador en el lavavajillas durante el ciclo de secado.
 - **Esterilizador eléctrico a vapor** para biberones de bebé. Siga las indicaciones del fabricante. No use un esterilizador para horno de microondas. Se pueden desinfectar todas las partes de la pieza de mano del nebulizador en el esterilizador eléctrico a vapor. No deje las partes del nebulizador en el esterilizador durante el ciclo de secado. Asegúrese de que se enfríe el esterilizador antes de abrir la unidad para retirar las partes del nebulizador.
 - Deje remojando todas las piezas, **excepto el tubo**, en una mezcla de 1 parte de vinagre por 3 partes de agua. Deje remojando durante una hora. Enjuague con agua esterilizada. Tire la solución de vinagre cuando termine. **¡Si su hijo tiene fibrosis quística, no use el método del vinagre para desinfectar!**
4. Deje que todas las piezas se sequen al aire.
 - Guarde en una bolsa de plástico limpia.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.