

## Nebulizador PARI LC PLUS®


### Objetivo

PARI LC PLUS® es un equipo de nebulizador. Se usa para convertir el medicamento en vapor de manera que pueda ser inhalado. Tiene válvulas que se abren y se cierran cuando su hijo respira para ayudar a reducir el desperdicio del medicamento.

Cada equipo de PARI LC PLUS® debe durar 6 meses.

### Equipo necesario

- Nebulizador PARI LC PLUS® Ver Figura 1.
  1. Tapa de la válvula inspiratoria
  2. Parte superior del dosificador
  3. Cámara del nebulizador
  4. Tubo de conexión
- Máquina nebulizadora  
(funciona con compresores de cualquier marca)

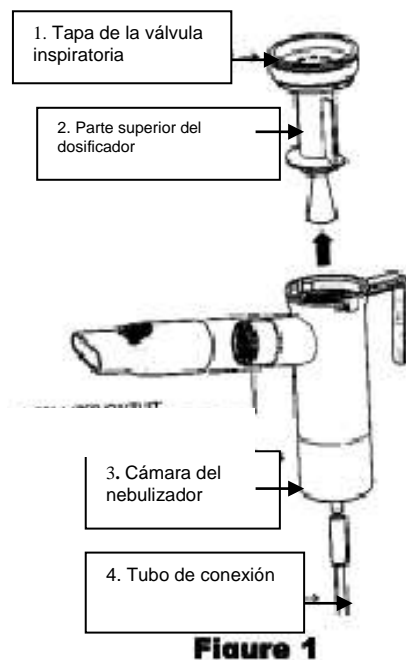

**Figure 1**


### ¿Cómo y cuándo usar el nebulizador PARI LC PLUS®?

El médico o la enfermera de su hijo le explicarán cómo y cuándo usar este dispositivo. Si tiene preguntas, consulte al médico, a la enfermera o al farmacéutico. Siga estos pasos.

1. Lávese las manos con agua y jabón o con desinfectante para las manos.
2. Coloque la **tapa de la válvula** sobre la **parte superior del dosificador del medicamento**. Presione firmemente.
3. Coloque la **boquilla**, con la válvula hacia arriba, o la **ascarilla** en la salida. Ver Figura 2.
4. Coloque el medicamento en la **cámara del nebulizador**.
5. Coloque la **parte superior del dosificador del medicamento** en la **cámara del nebulizador**. Gírela hasta que quede en su lugar.
6. Conecte el tubo en la parte inferior de la cámara.

Conecte el otro extremo a la máquina.

7. Encienda la máquina.
8. Mantenga el nivel del nebulizador durante el tratamiento.  
Cierre los labios alrededor de la boquilla o colóquese la mascarilla sobre la cara. Respire lentamente y un poco más profundo.  
Respire por la boca si usa la boquilla.

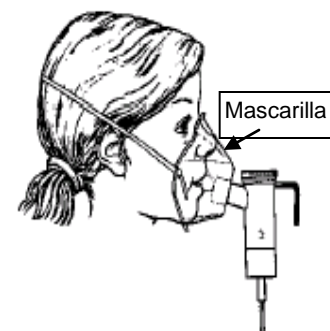

**Figure 2**

9. Apague la máquina cuando se haya acabado todo el medicamento. El tratamiento debe durar aproximadamente diez minutos.

### **Limpie el nebulizador PARI LC PLUS® justo después de cada tratamiento**

1. Desarme el nebulizador Pari LC PLUS®.
2. Lave todas las partes con agua tibia y jabón. No sumerja el tubo.
3. Enjuague con agua tibia.
4. Deje que las partes sequen al aire.
5. Desinfecte antes de usar el nebulizador nuevamente.

### **Desinfecte y esterilice el nebulizador PARI LC PLUS®**

1. Primero limpie el equipo y luego desinfectelo.
2. Desinfecte el nebulizador Pari LC PLUS® de acuerdo con las instrucciones del proveedor de atención de salud.
3. Desinfectelo con uno de los siguientes métodos:
  - Ponga a hervir durante 5 a 10 minutos.
  - Es seguro limpiar en la repisa superior del lavavajillas. Para desinfectar, su lavavajillas debe alcanzar por lo menos 158 grados durante 30 minutos. No deje las partes del nebulizador en el lavavajillas durante el ciclo de secado.
  - **Esterilizador eléctrico a vapor** para biberones de bebé. Siga las indicaciones del fabricante. No use un esterilizador para horno de microondas. Se pueden desinfectar todas las partes de la pieza de mano del nebulizador en el esterilizador eléctrico a vapor. No deje las partes del nebulizador en el esterilizador durante el ciclo de secado. Asegúrese de que se enfríe el esterilizador antes de abrir la unidad para retirar las partes del nebulizador.
  - Deje remojando todas las piezas (excepto el tubo) en una mezcla de 1 parte de vinagre por 3 partes de agua. Deje remojando durante una hora. Enjuague con agua. Deseche la solución de vinagre después de usarla. **Si su hijo tiene fibrosis quística, no use vinagre para desinfectar.**
4. Deje que todas las piezas se sequen al aire. Primero escurra las partes en una toalla limpia. Reemplace la toalla mojada por una seca y deje que las partes sequen al aire.
5. Guárdelo en una bolsa de plástico limpia.

**ALERTA:** Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su profesional sanitario sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**